


Массажер для глаз

Askona Performance Power Eyes&Head

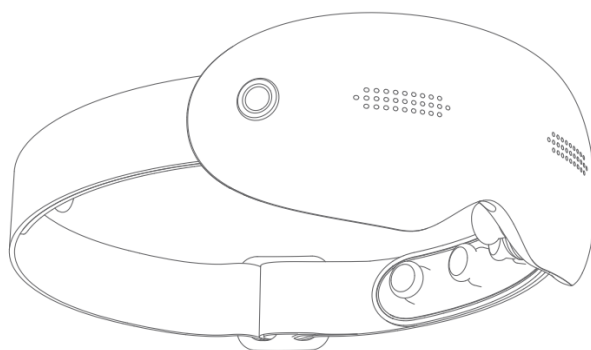

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА ЗАПРЕЩЕНО:

- Беременным женщинам;
- Детям младше 12 лет;
- После перенесенного инсульта;
- Лицам с травмами вокруг глаз и тем, кто только что перенес операцию (двойное веко), не разрешается использовать прибор в период восстановления;
- Лицам с симптомами заболевания глаз и с тяжелой формой глаукомы и катаракты, а также перенесшим операцию на глазах;
- В течение первого года после операции по коррекции близорукости. По истечении одного года обратитесь к врачу за консультацией;
- Лицам с сильным воспалением глаз;
- Лицам с ограниченными возможностями, теми, кто не обладает способностью выражать ясно свои мысли, в противном случае это может привести к несчастному случаю или вызвать физический дискомфорт;
- Лицам в состоянии алкогольного опьянения;
- При температуре тела 38 градусов и выше (период лихорадки);
- Тем, кто не чувствителен к нагреву, и тем, кто склонен к ожогам;
- Лицам с внедренными медицинскими электронными устройствами, такими как кардиостимуляторы;
- Лицам с злокачественными опухолями, заболеваниями сердца, тяжелой гипертонией;
- Используйте продукт под руководством врача при близорукости более 6,25 диоптрий;
- Не используйте в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната) и во время принятия душа, так как это может привести к травмам и повреждению прибора.